



Câmara de Drenagem Torácica MSB *Amazon*

Descrição

A Câmara de Drenagem Torácica MSB *Amazon* é utilizada para remover ar e fluido da cavidade intrapleural de pacientes. Restabelece a pressão negativa na cavidade intrapleural, restaurando o movimento pulmonar. Indicada para casos de pneumotórax, hemotórax, desvio do mediastino e outras complicações que afetam a respiração devido à perda de pressão negativa intrapleural.

Princípio de Funcionamento

Sistema descartável com selo de água ou aspiração a seco. Inclui portas para coletas de amostras, controle da aspiração e selo de água calibrado.




Câmara de Drenagem Torácica MSB *Amazon*

Benefícios do Produto

- Seguro e estéril;
- Facilidade de uso e descarte;
- Restabelece a função pulmonar normal;
- Monitoramento eficaz de fugas de ar;
- Adequado para diversas condições torácicas.

Acompanha

- 1 Tubo de drenagem;
- 1 Seringa de água destilada (30ml, não hipodérmica);
- Redutor (8-12Fr).

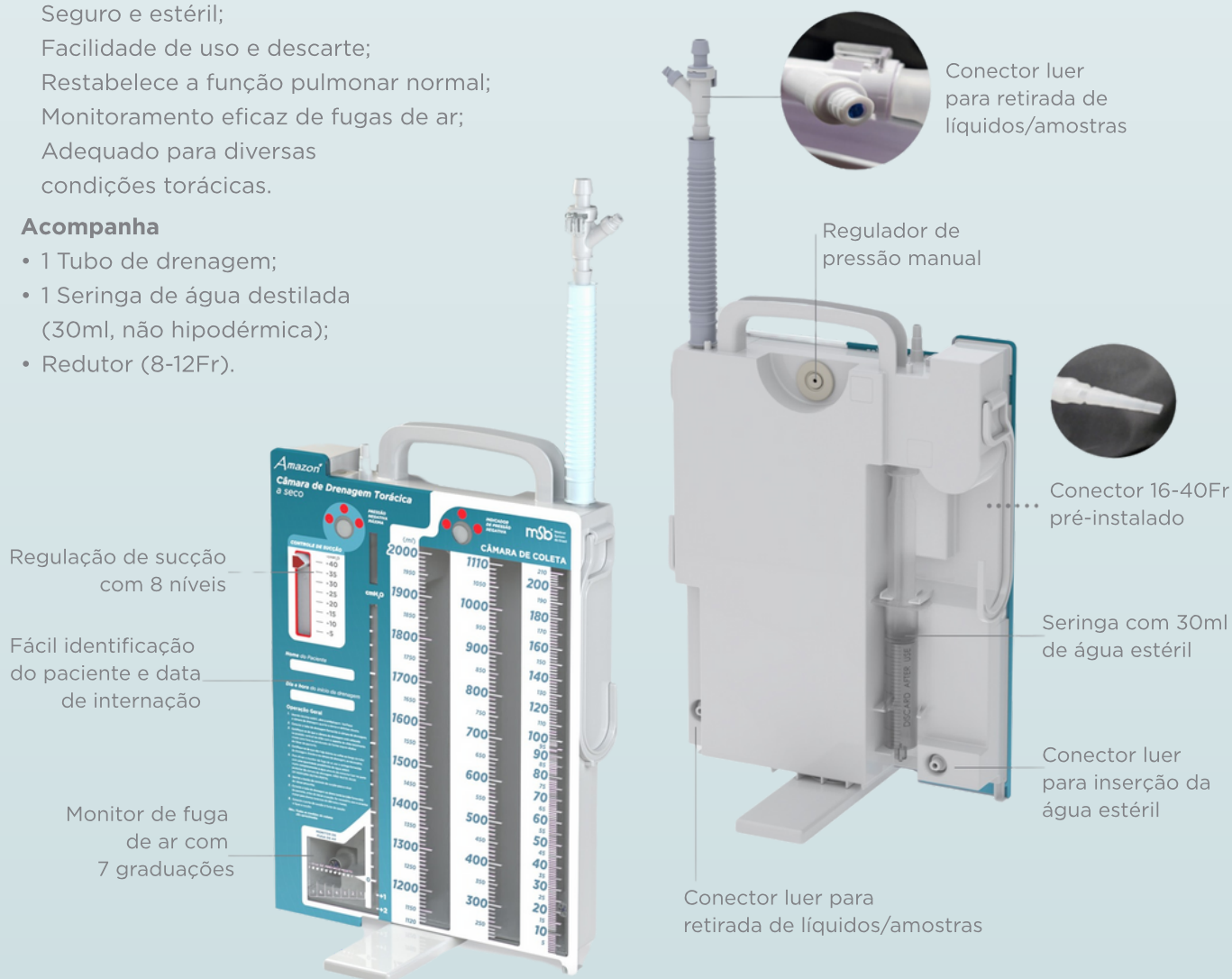

Código	Especificação	Quant. por caixa
72001	Câmara de Drenagem Torácica MSB Amazon 2000 ml vedação a seco	1 und.



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

msb@msbbrazil.com
msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Câmara de drenagem torácica MSB Amazon - Registro Anvisa: 80454419006 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1