



Kit CATETER ARTERIAL

Precisão a cada batida. Confiança em cada medição.

Descrição

O Kit Cateter Arterial MSB foi desenvolvido para garantir uma leitura invasiva contínua e precisa da pressão arterial e/ou coleta de amostras para gasometria sanguínea, com total segurança e confiabilidade.

Ideal para procedimentos que exigem monitoramento hemodinâmico contínuo, o cateter é inserido em artéria periférica por punção percutânea e conectado a um transdutor de pressão, acoplado a um equipo com solução salina.


As oscilações de pressão arterial captadas na extremidade do cateter são convertidas pelo transdutor em sinais elétricos, os quais são amplificados e exibidos em monitores multiparamétricos como curvas e valores numéricos de pressão arterial.

Especificações

- Fio-guia: aço inoxidável AISI 304
- Agulha introdutora: aço inoxidável AISI 304
- Cateter: poliuretano, material flexível e biocompatível que proporciona segurança e desempenho durante o procedimento

Especificações de medidas

Modelo	Dispositivo	Medidas
69005	KIT CATETER ARTERIAL	20Gx4,5CM FG 0,021x45CM AG 21GX4CM

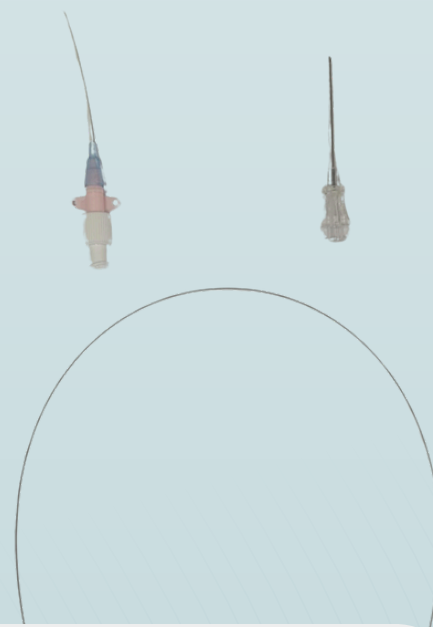

+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 [msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil.com)



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

KIT CATETER ARTERIAL - MSB - 80454419005 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1