



Speed Cross Twist

Bainha introdutora

Descrição

A Speed Cross Twist MSB é um introdutor longo defletível desenvolvido para garantir um acesso vascular periférico seguro e eficaz, permitindo a introdução percutânea de dispositivos médicos com mínimo trauma ao vaso.

Sua bainha possui ponta ajustável e manopla com anel rotativo, oferecendo controle preciso da deflexão distal. O sistema combina a tecnologia Flexsteer™ – um eixo trançado que proporciona maior controle e estabilidade – com a válvula hemostática Advanced SureSeal™, garantindo vedação eficiente e segurança durante procedimentos diagnósticos e terapêuticos.






Speed Cross Twist

Bainha introdutora

Especificações

- Dilatador Cônico;
- Retenção superior da curva;
- Extremidade distal atraumática;
- Porta lateral para heparina;
- Suporta guias metálicos de até 0,035" / 0,89mm de diâmetro, garantindo compatibilidade com uma variedade de procedimentos.

Código	Especificações
58403	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 6.5FRX45CM DEF 9MM
58406	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 6.5FRX90CM DEF 9MM
58407	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 7.0FRX45CM DEF 9MM
58409	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 7.0FRX65CM DEF 9MM
58411	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 7.0FRX90CM DEF 9MM
58415	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 8.5FRX65CM DEF 17MM
58440	SIST AC DEF SPEED CROSS TWIST MSB 12FRX71CM DEF 22MM

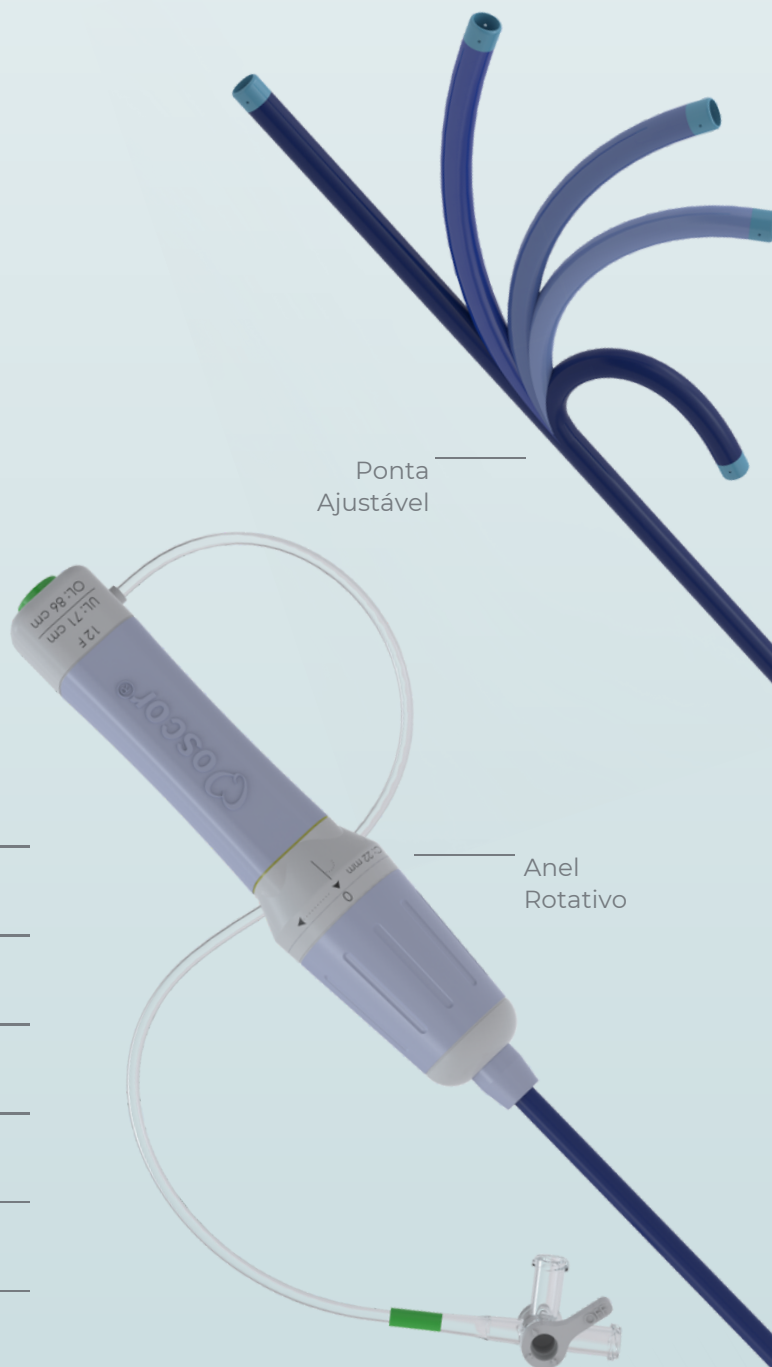

+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Speed Cross Twist MSB - Registro Anvisa: 80454419002 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1