

Bainha de Sucção


Ureteral MSB

Descrição

A Bainha de Sucção Ureteral MSB estabelece um canal de acesso seguro ao trato urinário durante cirurgias urológicas, como a ureteroscopia flexível, facilitando a passagem de endoscópios e instrumentos.

Seu diferencial é a aspiração contínua integrada: por meio de uma porta lateral conectada ao sistema de sucção, o dispositivo remove fragmentos (cálculos) e líquidos durante o procedimento, mantendo o campo de visão limpo e a pressão intrarrenal controlada.

O corpo em PEBAX com revestimento hidrofílico garante deslizamento suave e baixo atrito, enquanto a estrutura em aço inoxidável e PTFE assegura resistência e estabilidade ao longo de todo o canal de trabalho.

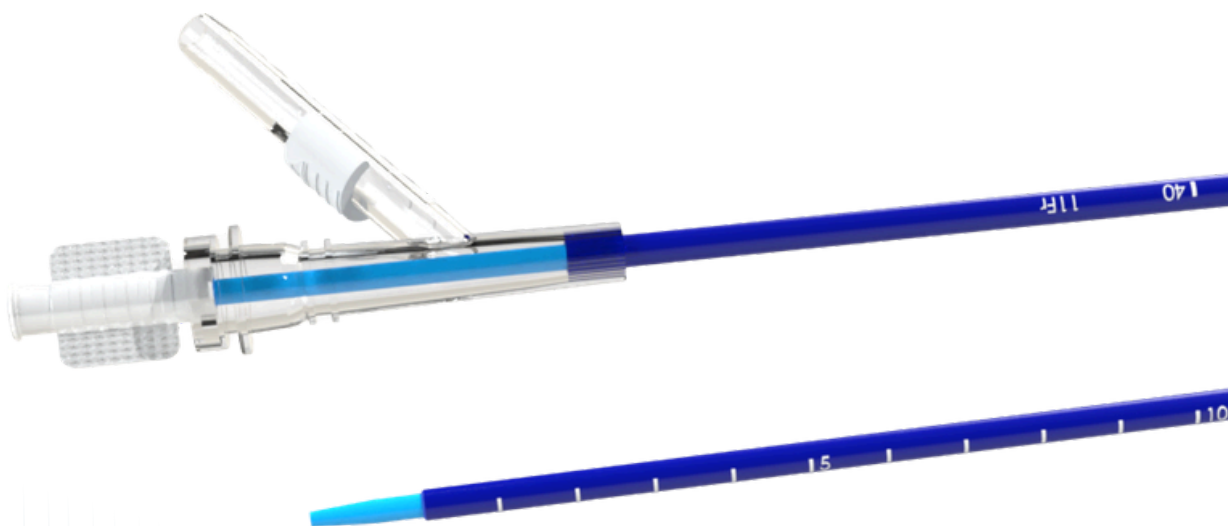

Bainha de Sucção


Ureteral MSB

Especificações

- Revestimento hidrofílico em toda a extensão da bainha, garantindo fácil inserção e navegação;
- Porta lateral de aspiração, permitindo sucção contínua de fragmentos e fluidos durante a cirurgia;
- Conjunto dilatador + bainha para inserção como unidade única, com transição suave;
- Compatível com monitoramento por fluoroscopia;
- Produto estéril, esterilizado em ETO, de uso único (proibido reprocessar).

Referências

Código	Diâmetros (Fr)	Comprimentos da bainha (cm):	Comprimentos do dilatador (cm):
UBSU-1240	12	40	50
UBSU-1250	12	50	60

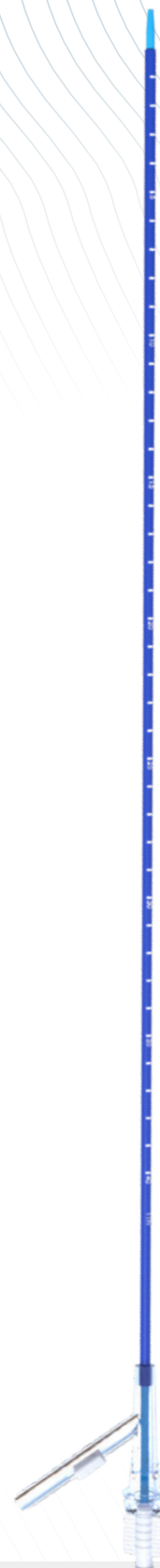

www.msbbrazil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Bainha de Sucção Ureteral - Registro ANVISA: 80454419022 - 08/2026 - MSB - Versão 1.0